

Catalogue de Produits

Technique Médicale



Pompe de **NUTRITION ENTÉRALE**
portable, conçue pour rendre la
nutrition par sonde **FACILE** et **SÛRE**.





Scanner pour
APPRENDRE À UTILISER
Compat Ella® Pompe



POMPE de NUTRITION ENTÉRALE avec CONNEXION PDMS.

Permet
la collecte
automatisée
des données

Le PDMS
rend visible le
processus de
nutrition

Facilite le suivi
de la nutrition des
patients aux soins
intensifs



Aperçu des Caractéristiques

- Programmes d'administration continu ou intervalle de 1 ml à 4000 ml ; avec ou sans dose limite
- Débit de 1 ml/h à 600 ml/h
- Le débit et la dose administrée sont toujours visibles à l'écran

Facile à Apprendre et à Comprendre

- Écran couleur avec symboles faciles à comprendre indiquant le statut de la pompe, le niveau de charge de la batterie et le mode de la pompe
- Clavier ergonomique en forme de U avec icônes intuitives
- Message texte pour indiquer le statut de la pompe, guider la programmation et [aider à la résolution des problèmes](#)

Précise et Sûre

- Alarmes d'occlusion en amont et en aval, alarme d'air dans la tubulure
- Précision d'administration de +/- 5 %
- Sécurité anti-débit libre automatique intégrée à la cassette pour [promouvoir la sécurité du patient](#)
- Informations distinctes sur 1) la nutrition en cours et 2) la dose cumulée délivrée
- Verrouillage du clavier pour [éviter les modifications involontaires](#)

Robuste

- Maintenance tous les 5 ans
- Peut être nettoyée sous l'eau courante chaude

Mobile

- Légère et portable, elle peut fonctionner dans toutes les orientations
- Autonomie de la batterie de 24 heures à 125 ml/h

Informations de Commande

Description	Numéro d'article	Unité de vente / carton	Pharmacode
Pompe Compat Ella®	12367032	1 pièce	7364521
Compat Ella® Câble Appel Infirmier	12279521	1 pièce	—
Compat Ella® Câble PDMS	12277770	1 pièce	—

Compat ella® Sets

TUBULURES pour l'administration de **SOLUTIONS NUTRITIVES**, de **LIQUIDES** ou de **MÉDICAMENTS** avec la **POMPE DE NUTRITION** Compat Ella®.

Système de Sécurité Intégré


Toutes les tubulures Compat Ella® disposent d'une technologie de sécurité brevetée **AAFF: Auto-Anti-Free-Flow** (anti-débit libre automatique). Ce dispositif est intégré à la cassette de la tubulure et est toujours actif pour la sécurité du patient.

Spécifications

Stérile:	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (EO).
Emballage:	Emballé individuellement en carton de 30 pièces (29.5 × 26 × 19 cm).
Durée de conservation:	3 ans à partir de la date de production. Date d'expiration indiquée sur l'emballage.
Durée d'utilisation:	24 heures. À usage unique.
Longueur:	Distance du connecteur pour la nutrition entérale à l'extrémité de la sonde du patient: 230 cm. Distance du connecteur pour la nutrition entérale à la pompe: 50 cm.
Diamètres:	Diamètre intérieur: 3.0 mm. Diamètre extérieur: 4.15 mm.
Norme ISO:	Connecteur ENFit® conforme à la norme ISO 80369-3 et connecteur ENPlus conforme à la norme ISO 18250-3.
Marquage CE:	Conforme à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE. Une certification CE a été délivrée par un organisme notifié accrédité: TÜV SÜD (CE0123).
Classification:	Classe IIa.
Fabricant légal:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, 20068 Peschiera Borromeo (MI). ITALY.
Développement durable:	Système de management environnemental conforme à la norme ISO 14001:2015.
Matériaux:	Tubulure: PVC et silicone.



Compat Ella® Spike Set

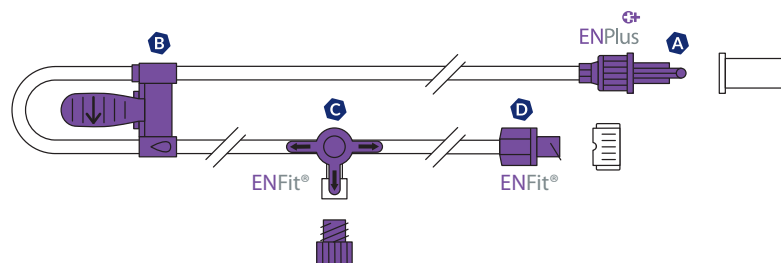


Composants

- A** Trocart ENPlus spécifique à la nutrition entérale (connecteur pour le contenant de nutrition) avec fermeture à vis et bouchon
- B** Cassette Compat Ella® avec système de sécurité breveté anti-débit libre automatique
- C** Port de médication à 3 voies compatible ENFit® avec bouchon
- D** Extrémité distale ENFit® avec bouchon (raccord pour la sonde du patient)

Informations de Commande

Description	Numéro d'article	Unité de vente / carton	Pharmacode
Compat Ella® Spike Set	12298203	30 pièces	7103536

Compat Ella® Set Universel

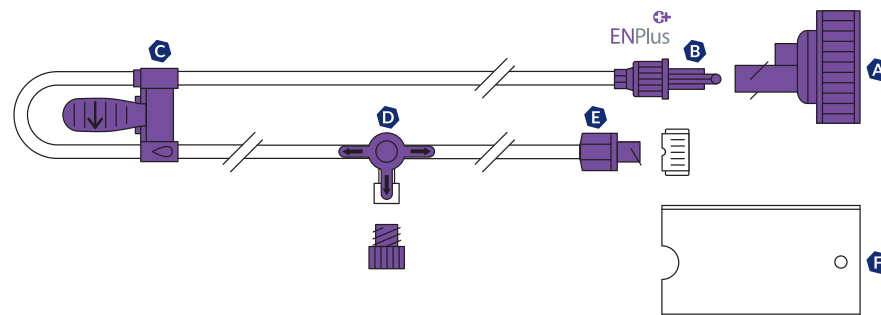


Composants

- A** Bouchon à vis universel avec filtre à air intégré et port ENPlus compatible avec les contenants de nutrition à large goulot de Ø 40 mm en verre et en plastique (DIN 168-1)
- B** Trocart ENPlus (connecteur pour le contenant de nutrition) avec fermeture à vis
- C** Cassette Compat Ella® avec système de sécurité breveté anti-débit libre automatique
- D** Port de médication à 3 voies ENFit® avec bouchon
- E** Extrémité distale ENFit® avec bouchon (raccord pour la sonde du patient)
- F** Support pour bouteille de 500 ml en PEBD (polyéthylène basse densité)

Informations de Commande

Description	Numéro d'article	Unité de vente / carton	Pharmacode
Compat Ella® Set Universel	12298206	30 pièces	7103559

Compat Ella® Combiset 1.5 l

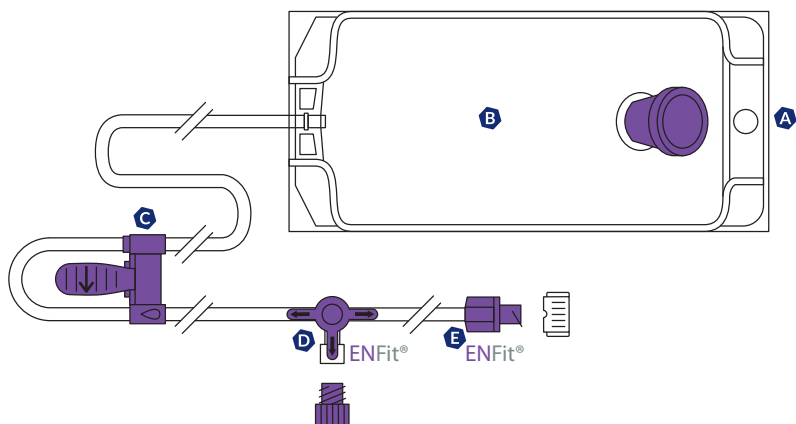


Composants

- A** Large ouverture avec fermeture à vis et suspension intégrée
- B** Flexibag® 1.5 litre en EVA avec graduations (à 50 ml et chaque 100 ml) et champs d'inscription pour le nom du patient et autres informations importantes (formule, volume, date et débit)
- C** Cassette pour pompe Compat Ella® avec système de sécurité breveté anti-débit libre automatique
- D** Port de médication à 3 voies compatible ENFit® avec bouchon
- E** Extrémité distale ENFit® avec bouchon (raccord pour la sonde du patient)

Informations de Commande

Description	Numéro d'article	Unité de vente / carton	Pharmacode
Compat Ella® Combiset 1.5 l	12298202	30 pièces	7103507

Compat Ella® Set Double Spike

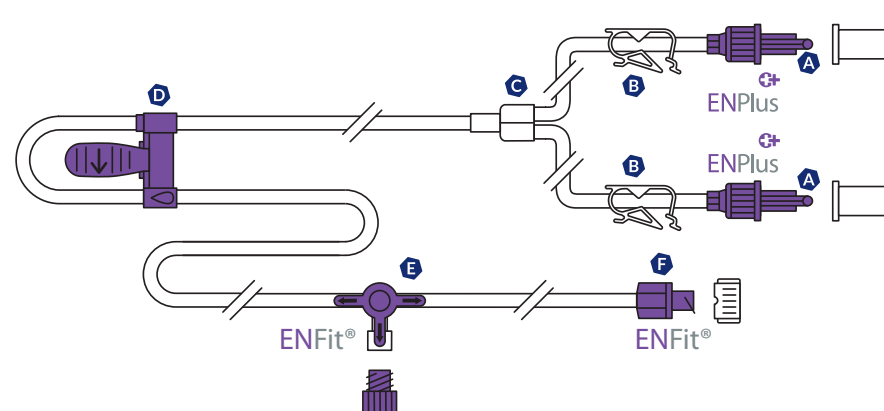

Composants

- A** Trocarts ENPlus spécifiques à la nutrition entérale (connecteur pour le contenant de nutrition) avec fermeture à vis et bouchon
- B** Clamp pour arrêter manuellement l'écoulement des liquides
- C** Jonction en Y
- D** Cassette Compat Ella® avec système de sécurité breveté anti-débit libre automatique
- E** Port de médication à 3 voies compatible ENFit® avec bouchon
- F** Extrémité distale ENFit® avec bouchon (raccord pour la sonde du patient)

Informations de Commande

Description	Numéro d'article	Unité de vente / carton	Pharmacode
Compat Ella® Set Double Spike	12297288	30 pièces	7103482

Sac à Dos Compat Ella®




Le **SAC À DOS** Compat Ella® est conçu pour être utilisé avec la **POMPE DE NUTRITION** Compat Ella® ainsi qu'avec le **STATIF DE TABLE**. Il convient aux **ADULTES** et aux **ENFANTS**.



Une Conception Intelligente

- Un grand compartiment à fermeture éclair permet de **mettre et de sortir facilement** la pompe Compat Ella®, la tubulure et le contenant de nutrition sans les débrancher.
- Conçu pour être utilisé avec le statif de table/accessoire pour sac à dos Compat Ella® pour un **confort ultime**.
- Ouverture sur le côté droite et gauche pour le passage de la tubulure.

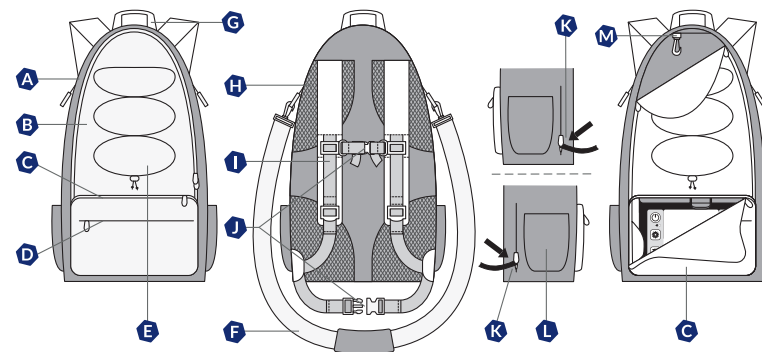

Composants

- A** Compartiment principal avec deux fermetures éclair
- B** Tissu en nylon Ripstop 420D, avec revêtement imperméable
- C** Ouverture frontale pour un accès rapide à la pompe
- D** Compartiment avec fermeture éclair pour les accessoires
- E** Sangle élastique pour sécuriser les petits accessoires
- F** Sangle amovible pour fauteuil roulant/utilisation en bandoulière
- G** Poignée externe pour suspendre le sac à dos
- H** Rembourrage 3D pour le confort du patient
- I** Sangles ajustables pour les épaules
- J** Sangles ajustables au niveau de la poitrine et des hanches
- K** Ouvertures latérales avec fermeture éclair pour permettre le passage de la tubulure à gauche ou à droite
- L** Compartiments latéraux pour les petits accessoires
- M** Système de suspension pour la nutrition

Informations de Commande

Description	Numéro d'article	Unité de vente / carton	Pharmacode
Sac à Dos Compat Ella®	12277736	1 pièce	6429891

Statif de Table Compat Ella®




Le **STATIF DE TABLE** est conçu pour l'utilisation avec le **SAC À DOS Compat Ella®** lors de **DÉPLACEMENTS** ainsi comme support de **TABLE AUTONOME**.



Accessoire Pratique Deux en Un

- Statif de table: Petit, portable, pratique et discret.
- Accessoire de sac à dos: Se glisse facilement dans le sac à dos Compat Ella® sans débrancher la tubulure, pour une utilisation mobile.
- Grâce à sa tige et à ses sangles ajustables, il est compatible avec la plupart des contenants de nutrition jusqu'à 1500 ml.

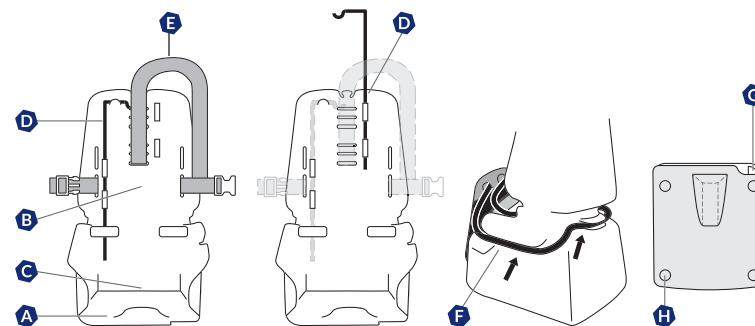

Composants

- A** Compartiment pour la pompe
- B** Compartiment pour la nutrition
- C** Compartiment de rangement pour l'adaptateur secteur (lorsqu'il n'est pas relié au secteur)
- D** Tige amovible et ajustable en acier inoxydable
- E** Sangle amovible et ajustable pour le contenant de nutrition
- F** Guide encastré pour éviter tout emmêlement de la tubulure
- G** Passage pour l'adaptateur secteur lorsqu'il est connecté à la pompe
- H** Patins en caoutchouc



Informations de Commande

Description	Numéro d'article	Unité de vente / carton	Pharmacode
Statif de Table Compat Ella®	12277737	1 pièce	6429891

TUBULURES pour l'administration
de **SOLUTIONS NUTRITIVES**
de **LIQUIDES** ou de **MÉDICAMENTS**
par gravité.



Compat® Gravité Set Universel

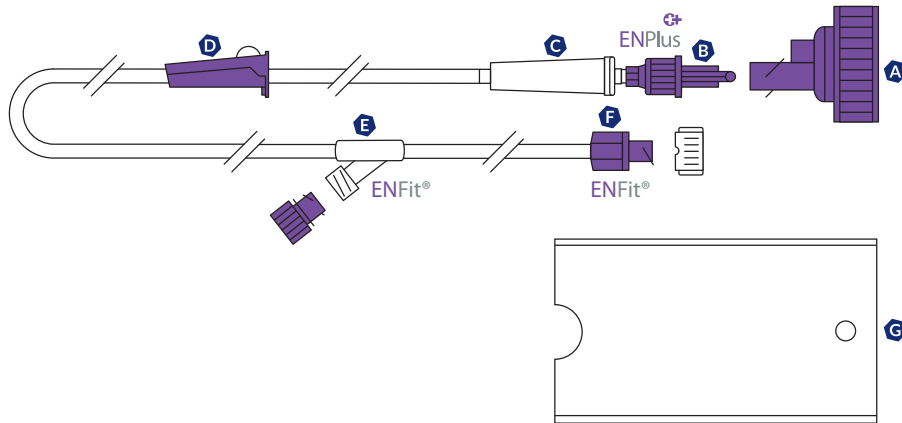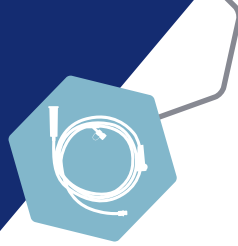

Composants

- A** Bouchon à visser universel avec filtre à air intégré et port ENPlus pour les contenants de nutrition à large goulot en verre et en plastique (DIN 168-1)
- B** Trocart ENPlus (connecteur pour le contenant de nutrition) avec fermeture à vis
- C** Chambre compte-gouttes
- D** Clamp à roulette pour ajuster ou arrêter le débit
- E** Port de médication ENFit® en Y avec bouchon
- F** Connecteur ENFit® avec bouchon (raccord pour la sonde du patient)
- G** Support de bouteille de 500 ml en PEBD (polyéthylène basse densité)

Informations de Commande



Description	Numéro d'article	Unité de vente / carton	Pharmacode
-------------	------------------	-------------------------	------------


Compat® Gravité
Set Universel

12298230

30 pièces

7103677

Compat® Gravité Combiset 1.5 l

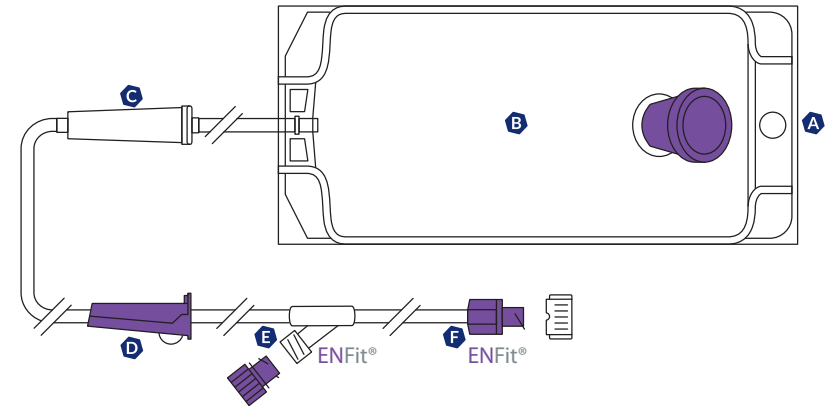

Composants

- A** Large ouverture avec fermeture à vis et suspension intégrée
- B** Flexibag® 1.5 litre en EVA avec graduations (à 50 ml et chaque 100 ml) et champs d'inscription pour les données du patient (nom, solution, dose, date et débit)
- C** Chambre compte-gouttes
- D** Clamp à roulette pour ajuster ou arrêter le débit
- E** Port de médication ENFit® en Y avec bouchon
- F** Connecteur ENFit® avec bouchon (raccord pour la sonde du patient)

Informations de Commande



Description	Numéro d'article	Unité de vente / carton	Pharmacode
-------------	------------------	-------------------------	------------

Compat® Gravité
Combiset 1.5 l

12298204

30 pièces

7103708

Compat Flexibaggle®

RÉSERVOIRS VIDES pour l'administration de SOLUTIONS NUTRITIVES et/ou LIQUIDES par la VOIE ENTÉRALE.

Spécifications

Stérile:	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (EO).
Emballage:	Emballé individuellement en carton de 30 pièces (58.5 × 38.5 × 16 cm).
Stockage:	Stocker à température ambiante. Tenir à l'abri de la lumière du soleil et de l'humidité.
Durée de conservation:	3 ans à partir de la date de fabrication. Date d'expiration indiquée sur l'emballage.
Durée d'utilisation:	24 heures. À usage unique.
Marquage CE:	Conforme à la directive européenne relative aux dispositifs médicaux 93/42 CEE. Une certification CE a été délivrée par un organisme notifié accrédité: TÜV SÜD (CE0123).
Classification:	Classe Is.
Fabricant légal:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, 20068 Peschiera Borromeo (MI). ITALY.
Développement durable:	Système de management environnemental conforme à la norme ISO 14001:2015.
Matériaux:	Récipient et bouchon: EVA. Tubulure: PVC.



Compat® Flexibaggle® 1.5 l



Compat® Flexibaggle® 500 ml



Aperçu des Caractéristiques

Sécurité des Patients

Grâce à son connecteur ENPlus, le Compat® Flexibaggle® 1.5 l est **100 % incompatible I.V.** Il est composé d'éthylène-acétate de vinyle (EVA), un matériau souple qui convient aux aliments.

Facilité d'Utilisation

Le système de suspension intégré et la large ouverture facilitent le remplissage de la poche. Grâce au bouchon qui se referme **en un quart de tour**, les risques de fuite sont réduits. Résistant aux chutes jusqu'à 1.5 m. Pliable pour **économiser de l'espace lors du stockage**.

Aperçu des Caractéristiques

Sécurité des Patients

Grâce à son connecteur ENPlus, le Compat® Flexibaggle® 500 ml est **100 % incompatible I.V.** Il est composé de polyéthylène (PE), un matériau qui convient aux aliments.

Facilité d'Utilisation

La large ouverture facilite le remplissage. Il **tient debout une fois rempli** ce qui facilite les manipulations. Pliable pour **économiser de l'espace lors du stockage**. Convient particulièrement à un emploi mobile, lorsqu'utilisé par exemple avec la pompe, le sac à dos et la tubulure Spike Compat Ella®.

Informations de Commande



Description	Numéro d'article	Unité de vente / carton	Pharmacode
Compat® Flexibaggle® 1.5 l	12306162	30 pièces	6986479

Informations de Commande



Description	Numéro d'article	Unité de vente / carton	Pharmacode
Compat® Flexibaggle® 500 ml	12440917	30 pièces	7767374

Compat Sondes

SONDES DE NUTRITION nasogastriques pour l'administration de **NUTRIMENTS**, de **LIQUIDES** ou de **MÉDICAMENTS** dans le tube digestif.

Spécifications

Stérile:	Stérilisé à l'oxyde d'éthylène (EO).
Emballage:	Emballé individuellement en carton de 10 pièces (220 × 90 × 235 mm).
Stockage:	Tenir à l'abri de la lumière du soleil et de l'humidité.
Durée de conservation:	3 ans à partir de la date de fabrication. Date d'expiration indiquée sur l'emballage.
Durée d'utilisation:	Jusqu'à 42 jours.
Longueur de la sonde:	120 cm.
Diamètre de la sonde:	De 5FR à 14FR.
Norme ISO:	Conforme aux normes ISO 80369-1 et ISO 80369-3.
Classification:	Class IIb.
Fabricant légal:	Cedic Srl, Via Liberazione 63/9, 20068 Peschiera Borromeo (MI). ITALY.
Développement durable:	Système de management environnemental conforme à la norme ISO 14001:2015.
Matériaux:	Tube: Polyuréthane. Connecteur: Copolyeste.





Connecteur ENFit® Simple Verrouillable avec Bouchon

- Incompatible I.V.
- Compatible uniquement avec les tubulures d'administration et seringues ENFit®

En polyuréthane, un matériau qui se ramollit à la température du corps

Sonde de 50 à 120 cm Radio-Opaque avec Repères tous les 5 Centimètres

- Permet un placement gastrique ou intestinal
- Vérification de la profondeur d'insertion
- Contrôle de la position de la sonde

Jusqu'à 42 Jours d'Utilisation

Identification du Produit sur le Tube (5FR - 14FR)


Identification claire des dimensions pour faciliter le remplacement de la sonde

Mandrin Prélubrifié en Circuit Ouvert

- Renforce la sonde pour faciliter le placement
- Permet l'injection de fluides radio-opaques et l'aspiration des contenus gastriques sans retrait du mandrin
- Peut contribuer à réduire le risque de déplacement de la sonde au moment du retrait du mandrin

Extrémité Distale Arrondie et 4 Orifices Latéraux Décalés

- Conçue pour faciliter l'écoulement et réduire le risque d'occlusion de la sonde
- Permet une insertion non traumatique de la sonde

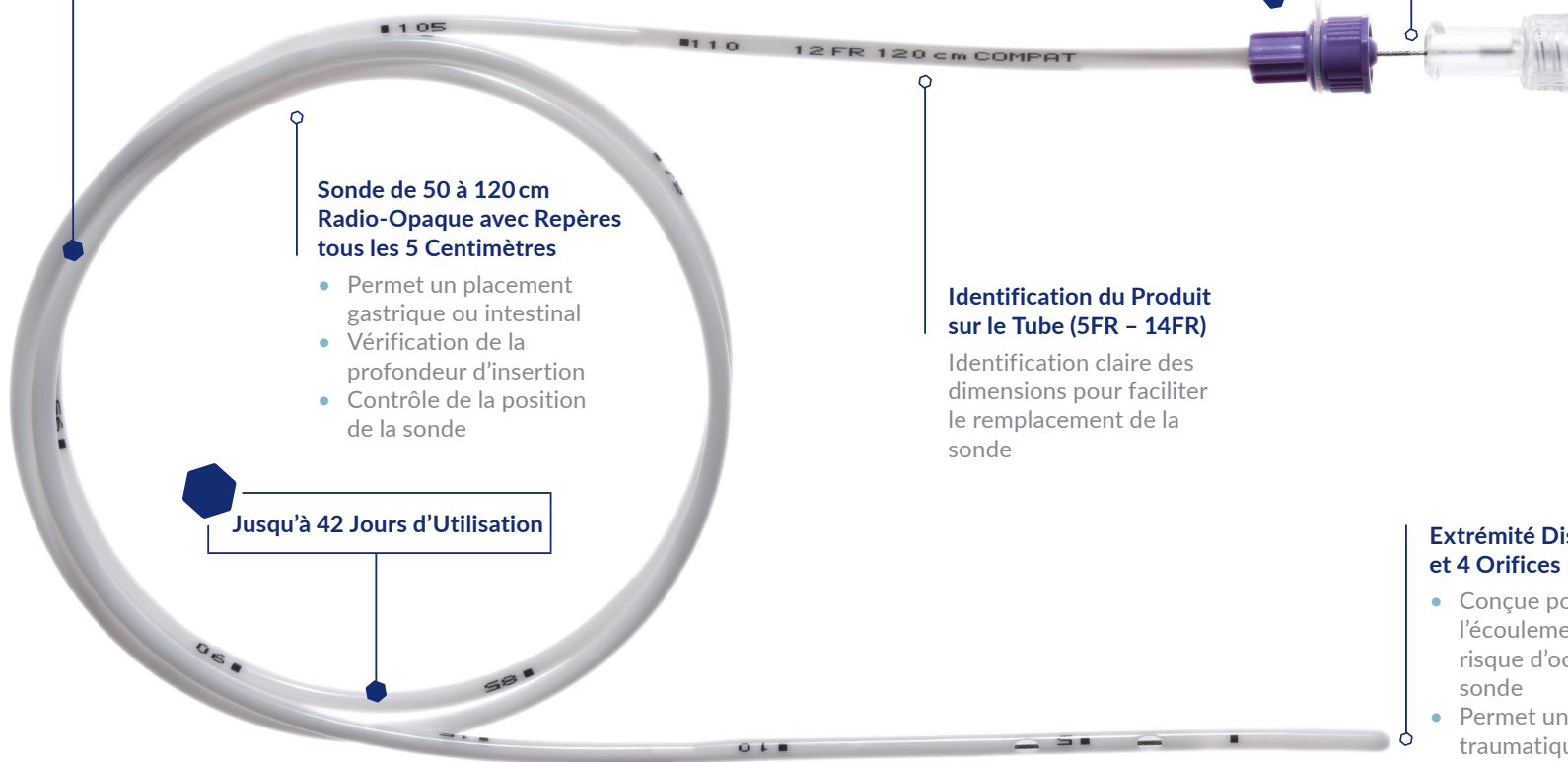

Compat® Soft Adultes





Scanner pour
APPRENDRE À UTILISER
Compat® Soft



Compat® Soft Junior

Scanner pour
APPRENDRE À UTILISER
Compat® Soft Junior

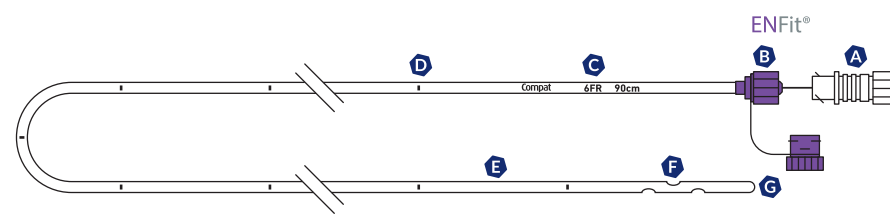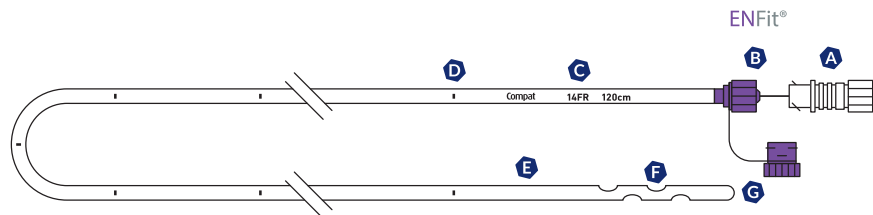

Composants

- A** Mandrin préassemblé en circuit ouvert
- B** Connecteur ENFit® avec bouchon
- C** Identification du produit, dimension en charrière (FR: French) et longueur imprimées sur le tube
- D** Repères d'insertion tous les 5 cm
- E** Tube en polyuréthane radio-opaque souple
- F** Orifices latéraux
- G** Extrémité distale arrondie

Composants

- A** Mandrin préassemblé en circuit ouvert (uniquement pour Compat® Soft 6FR)
- B** Connecteur ENFit® avec bouchon
- C** Identification du produit, dimension en charrière (FR: French) et longueur imprimées sur le tube
- D** Repères d'insertion tous les 5 cm
- E** Tube en polyuréthane radio-opaque souple
- F** Orifices latéraux
- G** Extrémité distale arrondie

Informations de Commande




Description	N° d'art.	Diamètre	Longueur	Unité de vente / carton	Pharmacode
Compat® Soft 8FR 120 cm S	12363210	8FR	120 cm	10 pièces	7468338
Compat® Soft 10FR 120 cm S	12362842	10FR	120 cm	10 pièces	7468321
Compat® Soft 12FR 120 cm S	12362605	12FR	120 cm	10 pièces	7468315
Compat® Soft 14FR 120 cm S	12363179	14FR	120 cm	10 pièces	7468309


Informations de Commande



Description	N° d'art.	Diamètre	Longueur	Mandrin	Unité de vente / carton	Pharmacode
Compat® Soft Junior 5FR 50 cm	12363073	5FR	50 cm	non	10 pièces	7468350
Compat® Soft Junior 6FR 90 cm S	12362546	6FR	90 cm	oui	10 pièces	7468344

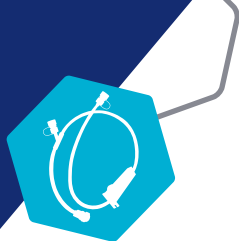

SONDE nasogastrique à LUMIÈRE SIMPLE et DOUBLE CONNECTEURS pour la NUTRITION et le DRAINAGE.

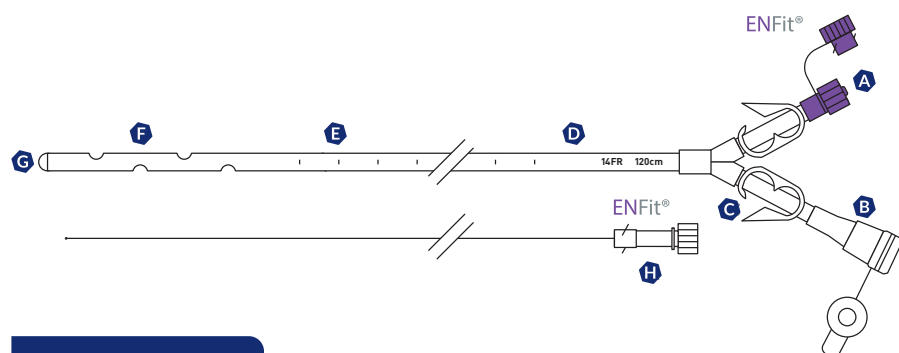

Composants

- A** Connecteur ENFit® avec bouchon
- B** Connecteur de type ENLock
- C** Clamps pour prévenir les fuites de liquides
- D** Identification du produit (14FR) pour un remplacement facile de la sonde
- E** Sonde en polyuréthane radio-opaque avec repères de profondeur tous les 5 cm
- F** 4 orifices latéraux décalés conçus pour faciliter le passage des flux
- G** Extrémité distale arrondie conçue pour faciliter l'insertion de la sonde
- H** Mandrin prélubrifié et en circuit ouvert

Informations de Commande



Description	Numéro d'article	Unité de vente / carton	Pharmacode
Compat® DualPort 14FR 120cm S	12391311	20 pièces	7533113

Dispositifs Médicaux pour la NUTRITION ENTÉRALE conçus pour AMÉLIORER LE SOIN DES PATIENTS EN USI.




Compat Ella®

Pompe de nutrition entérale portable
avec connexion PDMS

Compat® Dualport 14FR 120 cm

Sonde nasogastrique à lumière simple et
double connecteurs pour la nutrition et le
drainage

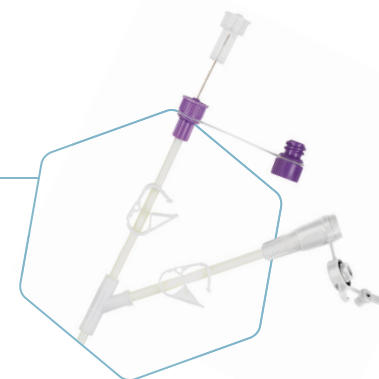

Compat® Soft

Gamme complète de sondes de
nutrition nasogastriques

Compat® Modum

Accessoire pour l'aspiration et la
mesure du résidu gastrique en
circuit fermé



 Compat[®] Accessoires

ACCESSOIRES pour
SONDES et ADAPTEURS.







Scanner pour
APPRENDRE À UTILISER
Compat® Modum



Compat® Modum est un **ACCESSOIRE** pour l'aspiration du **RÉSIDU GASTRIQUE** en **CIRCUIT FERMÉ** et son éventuelle **RÉINTRODUCTION** dans l'estomac du patient. Pour utilisation avec des **SONDES**, des **SERINGUES** et des **POCHES DE COLLECTE** appropriées. Il convient également à la **NUTRITION ENTÉRALE** et à l'administration de **MÉDICAMENTS**.

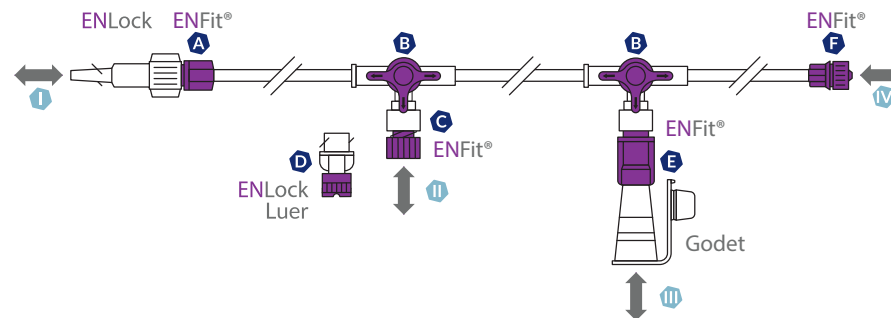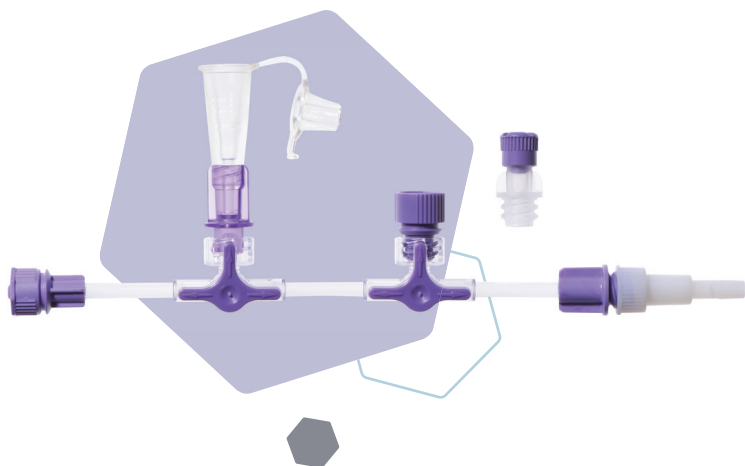

Composants

- A** Extrémité distale femelle ENFit® avec adaptateur ENLock amovible
- B** Connecteurs à 3 voies pour sélectionner la voie d'écoulement
- C** Port mâle pour seringue de drainage / pour médicaments ENFit® avec bouchon
- D** Adaptateur ENLock avec bouchon compatible avec les seringues de drainage / pour médicaments Luer, Oral et ENLock
- E** Connecteur godet avec bouchon compatible avec la plupart des dispositifs de drainage / d'aspiration
- F** Connecteur ENFit® mâle pour le raccordement à la tubulure d'administration

Voie d'Écoulement

- I** Vers ou depuis la sonde d'alimentation (raccord côté patient)
- II** Vers ou depuis la seringue de drainage/pour médicaments
- III** Vers ou depuis la poche de collecte
- IV** Depuis la tubulure d'administration (raccord côté nutrition)

Informations de Commande




Description	Numéro d'article	Unité de vente / carton	Pharmacode
Compat® Modum	12340186	50 pièces	7103795




Accessoire pour l'Aspiration et la Mesure du Résidu Gastrique en Circuit Fermé

Gestion de la Direction du Flux


Nutrition

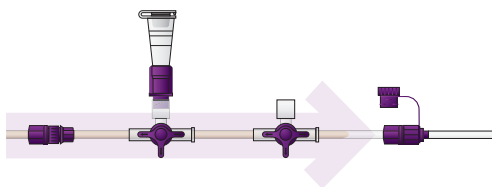

Administration des médicaments/ rinçage

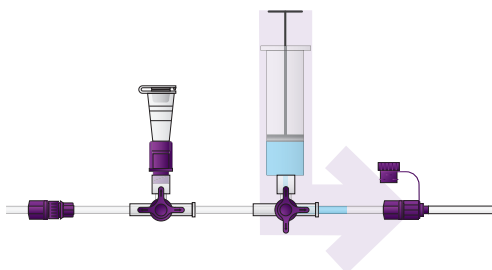


Collecte/ réintroduction du VRG* par Gravité

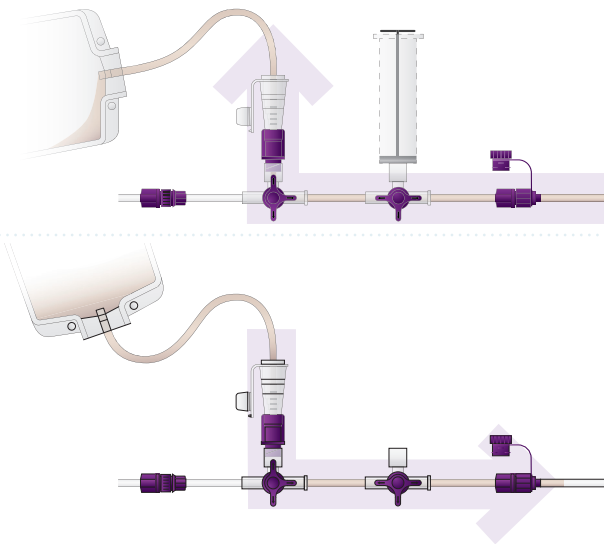



*VRG – Volume Résiduel Gastrique

Collecte/ réintroduction du VRG* avec une Seringue

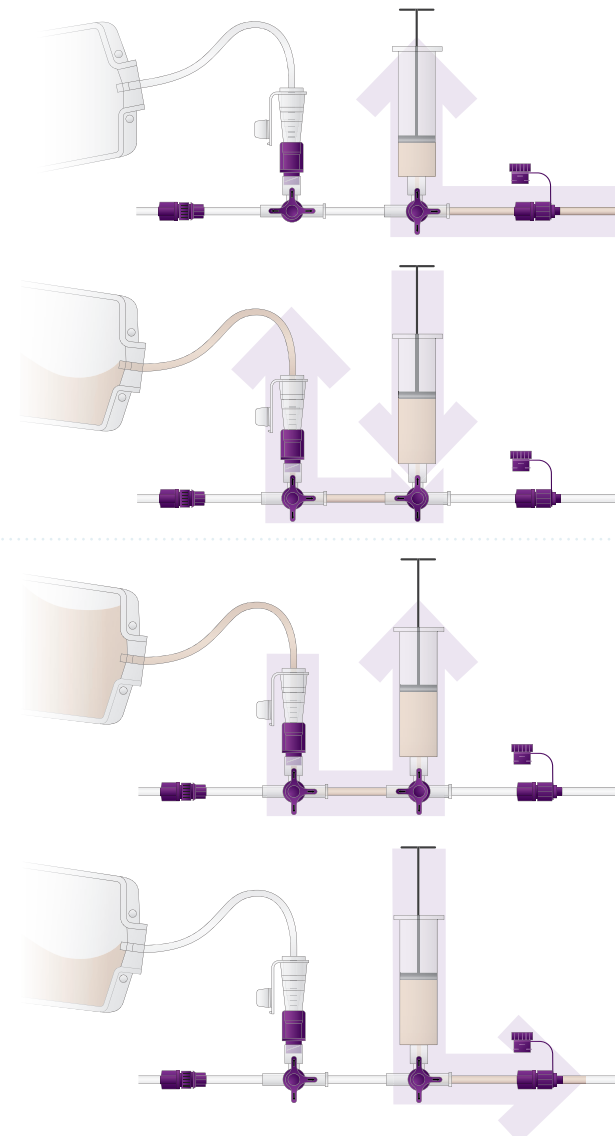

Gamme Complète de Prolongateurs pour Bouton de Gastronomie

Les **PROLONGATEURS** pour **BOUTONS** de **GASTROSTOMIE À BALLONNET Compat® Buddy** sont conçus pour l'administration entérale de **NUTRIMENTS**, de **LIQUIDES** et/ou de **MÉDICAMENTS**. Ils conviennent également à la **DÉCOMPRESSION GASTRIQUE PASSIVE**.

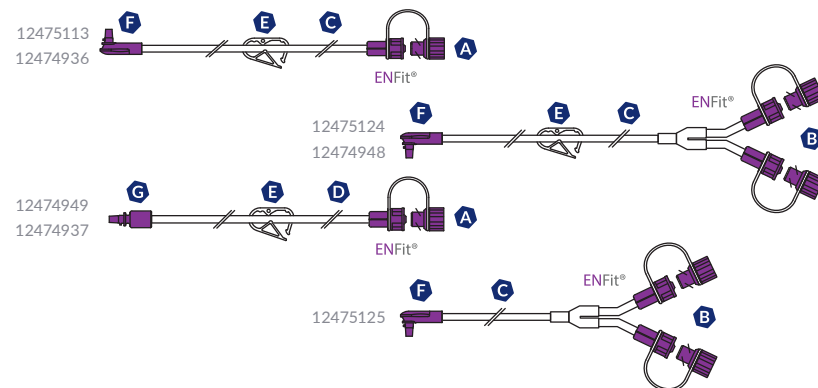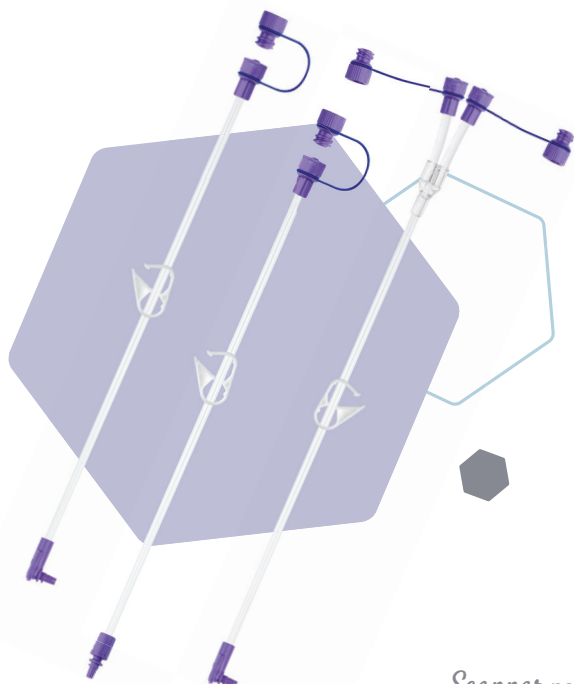

Composants

- A** Port de nutrition ENFit® avec fermeture à vis et bouchon
- B** Ports de nutrition ENFit® double avec fermeture à vis et bouchons
- C** Tube en PVC de diamètre externe standard de 4.15 mm
- D** Tube en PVC de diamètre externe large de 5.4 mm
- E** Clamp de fermeture
- F** Raccord coudé avec repère d'alignement (raccord pour la sonde du patient)
- G** Raccord droit avec repère d'alignement (raccord pour la sonde du patient)


Informations de Commande

Description	Numéro d'article	Connecteur bouton	Connecteur ENFit®	Longueur	Unité de vente	Pharmacode
Compat® Buddy Prolongateurs pour Bouton de Gastrostomie	12475125	Coudé	Double	5 cm	10 pièces	7848697
	12475124	Coudé	Double	30 cm	10 pièces	7848698
	12474948	Coudé	Double	60 cm	10 pièces	7848701
	12475113	Coudé	Simple	30 cm	10 pièces	7848699
	12474936	Coudé	Simple	60 cm	10 pièces	7848702
	12474949	Droit	Simple	30 cm	10 pièces	7848700
	12474937	Droit	Simple	60 cm	10 pièces	7848703

Compat® Adaptateurs de Transition ENFit®



ADAPTATEURS pour **CONNECTER** les **TUBULURES ENFit®** et les **PORTS** de **MÉDICATION ENFit®**.

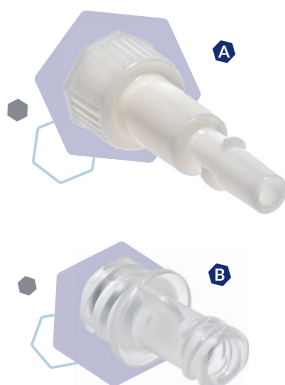

Adaptateur A:

Pour connecter les tubulures d'administration ENFit® aux sondes de nutrition ENLock / à embout conique

Adaptateur B:

Pour connecter les seringues Luer / Oral / ENLock aux ports de médication ENFit®

Informations de Commande

Description	Numéro d'article	Unité de vente / carton	Pharmacode
Compat® Adaptateurs de Transition ENFit®	12334450	10 pièces	7227072

Compat Ella® Câble PDMS



Aperçu des Caractéristiques

Permet la connexion physique du PDMS afin d'assurer le suivi des informations importantes telles que le débit et le volume administrés avec la pompe Compat Ella®.

Connexion Série

Permet la connexion en convertissant les informations de la thérapie émises par la pompe au format série standard.

Diffuse les données de la thérapie à intervalles réguliers et émet des alarmes (avertissements et dysfonctionnements incl.).

Compatibilité

La pompe de nutrition entérale Compat Ella® est « compatible PDMS » : elle peut transmettre des données lisibles par l'intermédiaire d'un système tiers. La liste des systèmes tiers compatibles est disponible sur demande.

Informations de Commande

Description	Numéro d'article	Unité de vente / carton
Compat Ella® Câble PDMS	12277770	1 pièce



Apprenez à **UTILISER** Compat Ella®
au travers de **VIDÉOS, TUTORIELS**
et **EXERCICES PRATIQUES.**



Accès au centre de formation:
www.compatella.com

Informations de Commande

Description	N° d'article	Unité de vente / carton	Pharmacode carton
Pompe de Nutrition et Accessoires			
Pompe Compat Ella®	12367032	1 pièce	7364521
Sac à dos Compat Ella®	12277736	1 pièce	6429916
Statif de Table Compat Ella®	12277737	1 pièce	6429891
Compat Ella® Câble Appel Infirmier	12279521	1 pièce	—
Compat Ella® Câble PDMS	12277770	1 pièce	—
Tubulures d'Administration			
Compat Ella® Set Universel	12298206	30 pièces	7103559
Compat Ella® Set Spike	12298203	30 pièces	7103536
Compat Ella® Combiset 1.5 l	12298202	30 pièces	7103507
Compat Ella® Set Double Spike	12297288	30 pièces	7103482
Compat® Gravité Combiset 1.5 l	12298204	30 pièces	7103708
Compat® Gravité Set Universel	12298230	30 pièces	7103677
Réservoirs Vides			
Compat® Flexibaggle® 500 ml	12440917	30 pièces	7767374
Compat® Flexibaggle® 1.5 l	12306162	30 pièces	6986479
Sondes de Nutrition			
Compat® Soft Junior 5FR 50 cm	12363073	10 pièces	7468350
Compat® Soft Junior 6FR 90 cm S	12362546	10 pièces	7468344
Compat® Soft 8FR 120 cm S	12363210	10 pièces	7468338
Compat® Soft 10FR 120 cm S	12362842	10 pièces	7468321
Compat® Soft 12FR 120 cm S	12362605	10 pièces	7468315
Compat® Soft 14FR 120 cm S	12363179	10 pièces	7468309
Compat® DualPort 14FR 120 cm S	12391311	20 pièces	7533113
Accessoires			
Compat® Modum	12340186	50 pièces	7103795
Compat® Buddy ExtSet 5 cm 90 Dual	12475125	10 pièces	7848697
Compat® Buddy ExtSet 30 cm 90 Dual	12475124	10 pièces	7848698
Compat® Buddy ExtSet 30 cm 90 Single	12475113	10 pièces	7848699
Compat® Buddy ExtSet 30 cm Str Single	12474949	10 pièces	7848700
Compat® Buddy ExtSet 60 cm 90 Dual	12474948	10 pièces	7848701
Compat® Buddy ExtSet 60 cm 90 Single	12474936	10 pièces	7848702
Compat® Buddy ExtSet 60 cm Str Single	12474937	10 pièces	7848703
Compat® Adaptateurs de Transition ENFit®	12334450	10 pièces	7227072

 **Nestlé** Health
Science

Compat[®]



www.compat.com